

fauteuil de positionnement

# Optimum

Série 1400

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS  
MÉDICALISÉS



CONFORT ET POSITIONNEMENT

OPTIMUM 1400

Montré en configuration standard  
avec tissu Silvertex Turquoise en option

# Optimum

fauteuil de positionnement

Appui-tête profilé-articulé (code AB-14)  
pour un meilleur support et alignement  
de la tête et du cou

Coussin d'assise PRÉ-CURE® composé  
de mousse à haute résilience et  
mousse visco gel à mémoire de forme

De série, ce coussin contribue  
à la prévention des escarres

Repose-coudes ajustables  
(code AB-13 - en option)

Section supérieure de dossier  
amovible avec ailettes  
latérales ajustables  
(code AB-17 en option)  
confortable, sécuritaire  
et idéale pour le repos



Bascule globale, inclinaison  
du dossier et appui-jambes  
par vérins au gaz

Le vérin du dossier est  
muni d'une bague de blocage  
ajustable permettant de limiter  
l'inclinaison entre 102° et 145°

Groupe Mobilité roues 24"  
(code 1P-02 - en option)



Dossier à bandes  
élastiques internes pour  
un confort imbattable



# Une solution aux assises prolongées...


- + améliore le confort des usagers en devenant la meilleure alternative entre le lit et le fauteuil de chambre.
- + répond aux besoins de positionnement.
- + permet des transferts sécuritaires tant de manière autonome qu'avec l'aide d'un lève-personne.
- + facilite la tâche des intervenants tout en aidant à réduire les risques d'accidents au travail.
- + réduit le nombre d'heure-soin.

## CONFIGURATION À L'USINE

Standard	Groupe confort AB-17	Groupe positionnement AB-14
Configuration du fauteuil avec haut de dossier amovible	Configuration du fauteuil avec haut de dossier amovible et ailettes ajustables	Configuration avec appui-tête profilé-articulé, remplace le haut de dossier standard

## GROUPE D'ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION
1P-04	Groupe UTILITÉ : table d'activité + support cervical
1P-02	Groupe MOBILITÉ roues 24" (60 cm) avec freins et anti-bascules
1P-06	Combinaison groupe UTILITÉ et MOBILITÉ

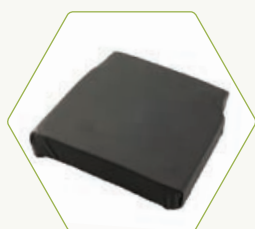

AA-10



AB-12



AB-13



AB-14-R



AB-17



AB-18-R

## ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION
AA-03	Réduction de hauteur de l'assise 2" (5 cm)
AA-04	Siège évidé pour coussins spéciaux
AA-06	Coussins latéraux réducteur de largeur 1" (2,5 cm)
AA-10	Coussin PRÉ-CURE® PRO (option AA-04 obligatoire)
AB-04	Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle
AB-05	Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle
AB-06	Appui-épaules
AB-07	Support cervical
AB-08	Appui-tête profilé
AB-09	Dossier à tension ajustable
AB-12	Supports thoraciques structuraux
AB-13	Repose-coudes ajustables (paire)
AB-14-R	Appui-tête profilé-articulé additionnel
AB-17-R	Ailettes ajustables pour section supérieure de dossier
AB-18-R	Haut de dossier additionnel
AC-01	Table d'activité opaque
AC-03	Table d'activité avec fenêtre en Lexan
AC-04	Coussin de recouvrement de table
AC-07	Support pour hémiplégique
AD-01	Coussin recouvrement palette d'appui-pieds
AD-02	Protecteurs latéraux de jambes
AD-03	Extension d'appui-pieds 2" (5 cm)
AD-04	Coussin élévateur d'appui-pieds
AD-05	Palette d'appui-pied pleine largeur
AE-01	Tige à soluté ajustable en hauteur
AE-02	Support universel de sac de drainage
RA-03	Sangles latérales retenue de table
RA-03A	Sangle de table englobante
RA-19	Ensemble butée d'abduction et toile d'installation

Recouvrement de base en vinyle, tissu Crypton et vinyle Silvertext disponibles en option. Rencontre les normes de feu CA TB117-2013.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1400-18	1400-20	1400-22	1400-24
Longueur min. fermé	38" / 97 cm			
Longueur max. ouvert	68" / 173 cm			
Largeur hors tout	23 1/2" / 60 cm	26 1/2" / 67 cm	29 1/4" / 74 cm	29 1/4" / 74 cm
Largeur hors-tout (groupe MOBILITÉ)	27 1/2" / 70"cm	32 1/2" / 83 cm	35 3/4" / 91 cm	35 3/4" / 91 cm
Hauteur siège/sol	20 1/2" / 52 cm			
Hauteur avec haut de dossier	50" / 127 cm			
Sans haut de dossier	39 3/4" / 101 cm			
Largeur siège	17 3/4" / 45 cm	20 1/2" / 52 cm	22" / 56 cm	24" / 61 cm
Profondeur siège	15 1/2" à 19" / 39 à 48 cm			
Hauteur dossier totale	32" / 81 cm			
Hauteur dossier inférieur	20" / 51 cm			
Inclinaison de dossier	102 à 145 degrés			
Inclinaison du siège	0 à 30 degrés			
Angle siège/appui- jambes	80 à 132 degrés			
Hauteur des appuis- bras	0 à 8 1/2" / 0 à 22 cm • 0 à 11" / 0 à 28 cm avec option AA-03			
Poids total sans accessoires	85 lbs / 39 kg	90 lbs / 41 kg	95 lbs / 43 kg	
Capacité maximale	300 lbs / 136 kg		450 lbs / 204 kg	

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

# notre gamme complète

## SUPPORT À L'AUTONOMIE

THERA-GLIDE®  
BOIS



THERA-GLIDE®  
MÉTAL



THERA-GLIDE®  
TRANSITIONNEL



DYN-ERGO



NOMADE



VERSATILE



ÉVOLUTION



UTILITÉ



## CONFORT ET POSITIONNEMENT

COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM



## ACCESSOIRES

COUSSIN  
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES  
ANTI-GLISSEMENT



Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa+

[lpamedical.com](http://lpamedical.com)

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA  
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488