

fauteuil de positionnement

Comp-Position

Série 0

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



COMP-POSITION 0-7

Montré en vinyle Silvertex Ice,
appuis-bras amovibles (0A-03)
et roues de 13" (0E-01) en option



COMP-POSITION 0-07

Montré avec vinyle
Naugasoft Sapphire de série
et appuis-bras amovibles
(0A-03) en option

CONFORT ET POSITIONNEMENT

Comp-Position

fauteuil de positionnement

Appui-tête profilé-articulé de série pour un meilleur support et alignement de la tête et du cou




Coussin d'assise PRÉ-CURE® composé de mousse à haute résilience et mousse visco gel à mémoire de forme

De série, ce coussin contribue à la prévention des escarres

Ajustements divers par boulonnage :

- Largeur de siège
- Hauteur siège/sol
- Largeur de dossier

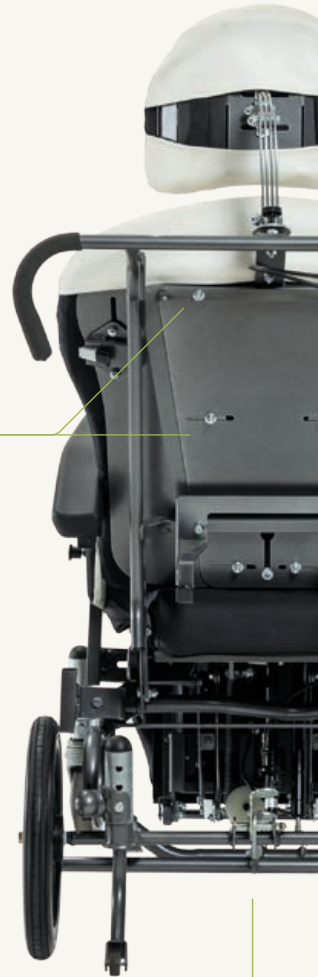

Fauteuil à 2 consignes

- Bascule globale
- Appui-jambes à compensation automatique par cylindre de blocage




Roues arrière de 13"
en option (code 0E-01)
avec frein central

Ajustable et facilement ré-attribuable

- + répond aux plus hauts standards de positionnement, de confort et de sécurité.
- + s'adapte aux différentes morphologies et aux problèmes de posture.
- + permet des transferts sécuritaires tant de manière autonome qu'avec l'aide de lève-personne.
- + facilite la tâche des intervenants tout en aidant à réduire les risques d'accidents au travail.
- + réduit les inventaires et les coûts grâce à ses ajustements permettant la ré-attribution facile.



OA-03

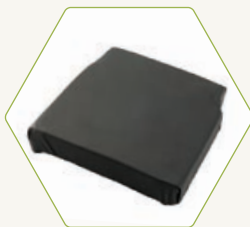

OA-04



OB-02



OB-05



OB-07



OC-01



OC-04



OD-02



OE-01

OPTIONS ET ACCESSOIRES

| ITEM | DESCRIPTION |
|--------|--|
| AE-02 | Support universel à sac de drainage |
| OA-01 | Coussins latéraux 1 1/2" |
| OA-03 | Appuis-bras amovibles |
| OA-04 | Coussin PRÉ-CURE® PRO |
| OA-06 | Coussin supplémentaire d'assise |
| OB-02 | Dossier à tension ajustable |
| OB-03 | Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle |
| OB-04 | Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle |
| OB-05 | Supports thoraciques |
| OB-06 | Appuis-épaules |
| OB-07 | Inclinaison du dossier avec cylindre au gaz de 98 à 135 degrés |
| OB-08 | Coussin supplémentaire de dossier |
| OC-01 | Table d'activité opaque |
| OC-02 | Table d'activité transparente |
| OC-03 | Coussin de recouvrement de table d'activités |
| OC-04 | Support pour hémiplégique |
| OD-01 | Coussin de recouvrement de palette d'appui-pieds |
| OD-02 | Protecteurs latéraux de jambes |
| OD-03 | Coussin élévateur d'appui-pieds |
| OE-01 | Roues de 13" avec frein central |
| OE-03 | Tige à soluté |
| OE-012 | Freins latéraux pour roues 13" |
| RA-03 | Sangles de retenue de table |
| RA-03A | Sangle de retenue englobante |
| RA-19 | Ensemble butée d'abduction et toile d'installation |

Recouvrement de base en vinyle, tissu Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option.
Rencontre les normes de feu CATB117-2013.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | Série 0 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Largeur maximum | 25 3/4" / 65,4 cm |
| Profondeur totale (fauteuil fermé) | 34 1/2" / 87,6 cm |
| Profondeur totale (fauteuil ouvert) | 65" / 165,1 cm |
| Hauteur hors tout | 53 1/4" / 135,3 cm |
| Hauteur siège / sol | 19" à 21" / 48,3 cm à 53,3 cm |
| Largeur d'assise entre appuis-bras | 16 1/4" à 19 1/4" / 41,3 cm à 48,9 cm |
| Profondeur d'assise | 15 1/2" à 19 1/2" / 39,4 cm à 49,5 cm |
| Hauteur dossier | 22 1/2" / 57,2 cm |
| Hauteur dossier avec appui-tête | 34" / 86,4 cm |
| Longueur de l'appui-jambes (fermé) | 16 1/2" à 18 1/2" / 41,9 cm à 47 cm |
| Extension de l'appui-jambes | 4 3/4" à 5 3/4" / 12 cm à 14,6 cm |
| Hauteur des appuis-bras | 7 1/4" à 12 1/4" / 18,4 cm à 31,1 cm |
| Bascule globale d'assise maximum | 45 degrés |
| Angle siège / dossier | 90 à 115 degrés |
| Poids total sans accessoires | 104 lbs / 47 kg |
| Capacité | 250 lbs / 113,4 kg |

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE



THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



THERA-GLIDE®
OASIS



DYN-ERGO



ÉVOLUTION



NOMADE



VERSATILE



UTILITÉ

CONFORT ET POSITIONNEMENT



COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM

ACCESSOIRES



COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa+

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488