

fauteuil de repos

# Harmonie

Série C

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS  
MÉDICALISÉS



HARMONIE C-207

Montré en vinyle Silvertex Plata  
en option



HARMONIE C-207

Montré en vinyle  
Silvertex Sapphire  
en option

CONFORT ET POSITIONNEMENT

# Harmonie

fauteuil de repos



Vinyle Silvertex en option contenant du nitrate d'argent\*  
Disponible en de multiples coloris, ce dernier sera un atout  
de taille dans la lutte contre les infections  
\* Le nitrate d'argent est un agent reconnu pour ses vertus antibactériennes

Ensemble de coussins amovibles en mousse  
à haute résilience pour un nettoyage  
facile et un confort supérieur

Trois roues pivotantes avec freins  
et une roue directionnelle avant droite

ergonomique, esthétique et durable

Haut de dossier avec barre  
de poussée (aide à la  
bascule par l'intervenant)

Système de bascule de l'assise  
permettant l'ouverture d'un  
appui-jambes et l'inclinaison du  
dossier par l'occupant



# L'accord idéal entre le confort et la fonction

D'une très grande polyvalence et offrant un excellent rapport qualité-prix, le fauteuil Harmonie peut être utilisé pour les prélèvements, les traitements spécifiques, les soins généraux et l'assise prolongée. Il convient aux établissements de courte et de longue durée.



C-C 1



C-C 2



C-C 4




C-C 6



C-C 8



C-C 9

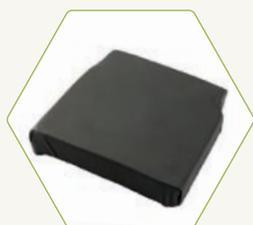

C-C 10



C-C 11



RB-18

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION
C-C1	Table latérale droite ou gauche
C-C2	Appui-coudes ajustables en hauteur
C-C3	Tige à soluté avec support arrière
C-C3A	Tige à soluté avec support avant
C-C3B	Support seul pour tige ronde 1/2"
C-C4	Coussin élévateur de pieds
C-C5	Ensemble de 4 roues pivotantes avec freins
C-C6	Paire d'appui-pieds escamotables et amovibles
C-C7	Paire de coussins protecteurs latéraux intérieurs d'assise
C-C8	Table d'activité opaque
C-C8-2	Table d'activité avec fenêtre en Lexan
C-C9	Support de rangement latéral de table
C-C10	Coussin PRÉ-CURE® PRO permettant l'insertion de solutions préventives ou curatives des escarres
C-C11	Appui-bras incliné pour prise de sang
AB-08H	Appui-tête profilé
AC-04	Coussin de recouvrement de plateau
AE-02	Support universel pour sac de drainage
RA-03	Sangles latérales de retenue de table
RA-03A	Sangle englobante de retenue de table
RA-19	Butée d'abduction sur toile universelle noire
RA-23	Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle noire
RA-24	Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle noire
RB-18	Appui cervical

Recouvrement de base en vinyle, tissu Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option. Rencontre les normes de feu CA TB117-2013.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	C-207-20
Largeur hors tout	28 1/2" / 72 cm
Longueur minimale (fermé)	36 1/2" / 93 cm
Longueur maximale (ouvert)	70" / 178 cm
Hauteur maximale (fermé)	46 1/2" / 118 cm
Hauteur siège / sol	Ajustable de 17 1/2" à 20 1/2" (44 à 52 cm)
Largeur d'assise	20 1/4" / 51 cm
Profondeur d'assise	Ajustable de 17" à 18 1/2" (43 à 47 cm)
Angle siège / dossier	Ajustable de 95 à 108 degrés
Poids sans accessoires	80 lbs / 36 kg
Capacité maximale du fauteuil	250 lbs / 114 kg

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

# notre gamme complète

## SUPPORT À L'AUTONOMIE



THERA-GLIDE®  
BOIS



THERA-GLIDE®  
MÉTAL



THERA-GLIDE®  
TRANSITIONNEL



THERA-GLIDE®  
OASIS



DYN-ERGO



ÉVOLUTION



NOMADE



VERSATILE



UTILITÉ

## CONFORT ET POSITIONNEMENT



COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM

## ACCESSOIRES



COUSSIN  
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES  
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa+

[lpamedical.com](http://lpamedical.com)

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA  
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488