

fauteuils de mobilité

Dyn-Ergo et Évolution série S



LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE

FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



DYN-ERGO S-150

Montré avec roues 13" [SA-30]
et vinyle Silververtex Turquoise
en option



ÉVOLUTION S-250

Montré en vinyle Naugasoft Cacao de série,
appui-pieds amovibles [SA-15], appui-cervical [RB-18]
et supports thoraciques [SA-20] en option

SUPPORT À L'AUTONOMIE

Dyn-Ergo et Évolution

fauteuils de mobilité

ajustements de série

Vinyle Silvertex en option.
Disponible en de multiples coloris.

Coussin d'assise PRÉ-CURE® composé de mousse à haute résilience et mousse visco gel à mémoire de forme. De série, ce coussin contribue à la prévention des escarres.

Angle de dossier
(95° à 115°)

Hauteur des appui-bras
3 positions possibles
(8", 8¾" et 9¾"
/ 20, 22 et 24 cm)

Profondeur d'assise
(13¾" à 18" / 35 à 46 cm)

Paire de roues de 20" en position
centrale pour une mobilité instinctive
(modèle S-250)

Hauteur d'assise
S-150: 13¾" à 18¾" / 34 à 47 cm
S-250: 16" à 21" / 41 à 53 cm

La bascule par vérin au gaz
combinée à une inclinaison
maximale de 34° et les
8 positions d'ancrage du vérin
permettent de s'adapter aux
besoins de l'utilisateur

Nos fauteuils de mobilité...

- + répondent aux besoins de mobilité, de positionnement et sont une alternative avantageuse au fauteuil roulant et/ou fauteuil de chambre.
- + assurent une meilleure liberté de mouvement aux patients à risque de chutes et contribuent à réduire l'agitation pour ceux qui ont des troubles cognitifs.
- + favorisent le maintien de l'autonomie et simplifient la réassignation par leurs multiples ajustements et accessoires.
- + facilitent l'acceptation sociale de par leur apparence conviviale et leur confort.



SA-10



SA-15




SA-30



SA-20



SA-40

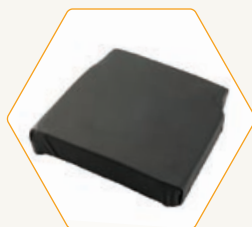

SA-60



SA-50



SA-130



RA-23

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION	Dyn-Ergo	Évolution
SA-10	Ensemble d'appui-pieds amovibles et escamotables	0	—
SA-15	Ensemble d'appui-pieds amovibles et escamotables	—	0
SA-20	Supports thoraciques structuraux	0	0
SA-30	Roues arrière de 13" [33 cm] avec freins	0	—
SA-40	Table d'activités opaque	0	0
SA-40-2	Table d'activité avec fenêtre en Lexan	0	0
SA-50	Appui cervical	0	0
SA-60	Coussin PRÉ-CURE® PRO permettant l'insertion de solutions préventives ou curatives des escarres	0	0
SA-70	Talonniers pour appui-pieds	0	0
SA-75	Tige à soluté	0	0
SA-80	Profondeur d'assise 15 1/2" à 20 3/4" [39 à 53 cm]	0	0
SA-90	Ensemble pour ajustement de la hauteur d'assise de 16 1/2" à 21 1/2" [42 à 55 cm]. Incompatible avec l'option SA-30	0	0
SA-120	Appui-pied pleine largeur (nécessite l'option SA-10 ou SA-15)	0	0
SA-130	Appui-Jambe élévateur ajustable (vendu individuellement ou en paire)	0	0
SA-215	Dossier à tension ajustable	0	0
RA-03	Sangles de retenue de table latérales	0	0
RA-03A	Sangle de table englobante	0	0
RA-19	Butée d'abduction sur toile universelle	0	0
RA-23	Appuis latéraux 4" [10 cm] avec toile universelle	0	0
RA-24	Appuis latéraux 6" [15 cm] avec toile universelle	0	0
AB-08-H	Appui-tête profilé	0	0
AE-02	Support universel pour sac à drainage	0	0

+ : De série 0 : Option — : Non disponible

Recouvrement de base en vinyle, tissu Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option. Rencontre les normes de feu CA TB117-2013.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Dyn-Ergo (S-150)					Évolution (S-250)				
	16	18	20	22	24	16	18	20	22	24
Longueur maximale	58"/147 cm					57"/145 cm				
Longueur minimale	31"/79 cm					32"/81 cm				
Largeur hors tout	23"/58 cm	25 1/2"/65 cm	27"/69 cm	29"/74 cm	30 1/2"/77 cm	25 1/2"/65 cm	28"/71 cm	29 1/2"/75 cm	31 1/2"/80 cm	33"/84 cm
Largeur hors tout avec option SA-30	27"/69 cm	29 1/2"/75 cm	31"/79 cm	33"/84 cm	34 1/2"/88 cm	—	—	—	—	—
Hauteur maximale	54"/137 cm					54 1/2"/138 cm				
Hauteur minimale	36 1/2"/93 cm					38"/97 cm				
Largeur d'assise	15 1/2"/39 cm	18"/46 cm	19 1/2"/50 cm	21 1/2"/55 cm	23"/58 cm	15 1/2"/39 cm	18"/46 cm	19 1/2"/50 cm	21 1/2"/55 cm	23"/58 cm
Profondeur d'assise	Ajustable de 13 3/4" à 18" [35 à 46 cm]					Ajustable de 16" à 21"/41 à 53 cm				
Hauteur d'assise	Ajustable de 13 1/2" à 18 1/2"/34 à 47 cm					Ajustable de 16" à 21"/41 à 53 cm				
Hauteur des appui-bras	Ajustable de 8" à 9 1/2"/20 à 24 cm					Ajustable de 8" à 9 1/2"/20 à 24 cm				
Inclinaison du dossier	Ajustable de 95 à 115 degrés					Ajustable de 95 à 115 degrés				
Bascule d'assise maximale	34 degrés					23 degrés				
Poids sans accessoires	46 lbs/21 kg	49 lbs/22 kg	52 lbs/24 kg	62 lbs/28 kg	65 lbs/29 kg	70 lbs/32 kg	73 lbs/33 kg	76 lbs/34 kg	86 lbs/39 kg	89 lbs/40 kg
Capacité maximale	250 lbs/113 kg			400 lbs/181 kg		250 lbs/113 kg			400 lbs/181 kg	

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE



THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



THERA-GLIDE®
OASIS BERÇANT



THERA-GLIDE®
OASIS STATIONNAIRE



DYN-ERGO



ÉVOLUTION



NOMADE



VERSATILE



UTILITÉ

CONFORT ET POSITIONNEMENT



COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM

ACCESSOIRES



COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa+

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

Édité le 2023-01