

fauteuil de positionnement

Optimum

Série 1400

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



OPTIMUM 1400

Montré en configuration standard
avec tissu Silvertex Turquoise en option



CONFORT ET POSITIONNEMENT

Optimum

fauteuil de positionnement

Appui-tête profilé-articulé (code AB-14)
pour un meilleur support et alignement
de la tête et du cou

Coussin d'assise PRÉ-CURE® composé
de mousse à haute résilience et
mousse visco gel à mémoire de forme

De série, ce coussin contribue
à la prévention des escarres

Repose-coudes ajustables
(code AB-13 - en option)

Section supérieure de dossier
amovible avec ailettes
latérales ajustables
(code AB-17 en option)
confortable, sécuritaire
et idéale pour le repos



Bascule globale, inclinaison
du dossier et appui-jambes
par vérins au gaz

Le vérin du dossier est
muni d'une bague de blocage
ajustable permettant de limiter
l'inclinaison entre 102° et 145°

Groupe Mobilité roues 24"
(code 1P-02 - en option)



Dossier à bandes
élastiques internes pour
un confort imbattable

Une solution aux assises prolongées...


- + améliore le confort des usagers en devenant la meilleure alternative entre le lit et le fauteuil de chambre.
- + répond aux besoins de positionnement.
- + permet des transferts sécuritaires tant de manière autonome qu'avec l'aide d'un lève-personne.
- + facilite la tâche des intervenants tout en aidant à réduire les risques d'accidents au travail.
- + réduit le nombre d'heure-soin.

CONFIGURATION À L'USINE

Standard	Groupe confort AB-17	Groupe positionnement AB-14
Configuration du fauteuil avec haut de dossier amovible	Configuration du fauteuil avec haut de dossier amovible et ailettes ajustables	Configuration avec appui-tête profilé-articulé, remplace le haut de dossier standard

GROUPE D'ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION
1P-04	Groupe UTILITÉ : table d'activité + support cervical
1P-02	Groupe MOBILITÉ roues 24" (60 cm) avec freins et anti-basculés
1P-06	Combinaison groupe UTILITÉ et MOBILITÉ

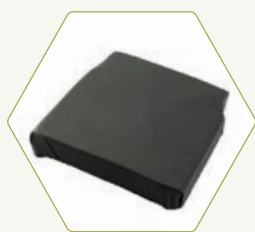

AA-10



AB-12



AB-13



AB-14-R



AB-17



AB-18-R

ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION
AA-03	Réduction de hauteur de l'assise 2" (5 cm)
AA-04	Siège évidé pour coussins spéciaux
AA-06	Coussins latéraux réducteur de largeur 1" (2,5 cm)
AA-10	Coussin PRÉ-CURE® PRO (option AA-04 obligatoire)
AB-04	Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle
AB-05	Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle
AB-06	Appui-épaules
AB-07	Support cervical
AB-08	Appui-tête profilé
AB-09	Dossier à tension ajustable
AB-12	Supports thoraciques structuraux
AB-13	Repose-coudes ajustables (paire)
AB-14-R	Appui-tête profilé-articulé additionnel
AB-17-R	Ailettes ajustables pour section supérieure de dossier
AB-18-R	Haut de dossier additionnel
AC-01	Table d'activité opaque
AC-03	Table d'activité avec fenêtre en Lexan
AC-04	Coussin de recouvrement de table
AC-07	Support pour hémiplégique
AD-01	Coussin recouvrement palette d'appui-pieds
AD-02	Protecteurs latéraux de jambes
AD-03	Extension d'appui-pieds 2" (5 cm)
AD-04	Coussin élévateur d'appui-pieds
AD-05	Palette d'appui-pied pleine largeur
AE-01	Tige à soluté ajustable en hauteur
AE-02	Support universel de sac de drainage
RA-03	Sangles latérales retenue de table
RA-03A	Sangle de table englobante
RA-19	Ensemble butée d'abduction et toile d'installation

Recouvrement de base en vinyle, tissu Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option. Rencontre les normes de feu CA TB117-2013.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1400-18	1400-20	1400-22	1400-24
Longueur min. fermé	38" / 97 cm			
Longueur max. ouvert	68" / 173 cm			
Largeur hors tout	23 1/2" / 60 cm	26 1/2" / 67 cm	29 1/4" / 74 cm	29 1/4" / 74 cm
Largeur hors-tout (groupe MOBILITÉ)	27 1/2" / 70"cm	32 1/2" / 83 cm	35 3/4" / 91 cm	35 3/4" / 91 cm
Hauteur siège/sol	20 1/2" / 52 cm			
Hauteur avec haut de dossier	50" / 127 cm			
Sans haut de dossier	39 3/4" / 101 cm			
Largeur siège	17 3/4" / 45 cm	20 1/2" / 52 cm	22" / 56 cm	24" / 61 cm
Profondeur siège	16 1/2" à 20" / 42 à 51 cm			
Hauteur dossier totale	32" / 81 cm			
Hauteur dossier inférieur	20" / 51 cm			
Inclinaison de dossier	102 à 145 degrés			
Inclinaison du siège	0 à 30 degrés			
Angle siège/appui- jambes	80 à 132 degrés			
Hauteur des appuis- bras	0 à 8 1/2" / 0 à 22 cm			
Poids total sans accessoires	85 lbs / 39 kg	90 lbs / 41 kg	95 lbs / 43 kg	
Capacité maximale	300 lbs / 136 kg		450 lbs / 204 kg	

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE



THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



THERA-GLIDE®
OASIS BERÇANT



THERA-GLIDE®
OASIS STATIONNAIRE



DYN-ERGO



ÉVOLUTION



NOMADE



VERSATILE



UTILITÉ

CONFORT ET POSITIONNEMENT



COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM

ACCESSOIRES



COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

Édité le 2023-01