

fauteuils berçants autobloquants

Thera-Glide®

Séries R, T et W (Bois et Oasis)

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



MODÈLE W-1

MODÈLE MÉTAL (R)



MODÈLE
TRANSITIONNEL (T)



MODÈLE W-3



SUPPORT À L'AUTONOMIE

Thera-Glide®

fauteuils berçants

Le fauteuil Thera-Glide® a su faire sa place dans les milieux de la santé, tant par ses effets thérapeutiques que par ses incroyables caractéristiques fonctionnelles et sécuritaires. Son mécanisme breveté d'immobilisation automatique rend le fauteuil fixe lors de la levée et permet le bercement lorsque la personne est complètement installée.

Le système est facile, silencieux et bloque à n'importe quelle position. Selon le modèle, les possibilités d'ajustements et d'accessoires permettent d'adapter le Thera-Glide® en fonction de vos besoins spécifiques. Il est d'entretien facile grâce aux recouvrements amovibles et aux matériaux utilisés.



Fixe lors
de l'assise

Berce
librement

Fixe lors
du lever

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Série R – Métal décoratif			Série W – Bois et Oasis			Série T – Transitionnel
	R-505 PETIT	R-605 RÉGULIER	R-705 LARGE	W-XXXX-17-XX PETIT	W-XXXX-20-XX RÉGULIER	W-XXXX-24-XX LARGE	
Hauteur totale	43" à 46" / 109 cm à 117 cm (dossier Contemporain)			44" à 47" / 112 cm à 119 cm (dossier Contemporain)			42 1/2" à 45 1/2" / 108 à 116 cm
Hauteur siège/sol	Ajustable de 16" à 19" / 41 à 48 cm par incréments de 1" / 2,5 cm Peut varier selon position de blocage au lever			Ajustable de 17" à 20" / 43 à 51 cm par incréments de 1" / 2,5 cm Peut varier selon position de blocage au lever			
Largeur totale	22" / 56 cm	26" / 66 cm	29" / 74 cm	22" / 56 cm [W-1 / W-3] 22 1/2" / 57 cm [W-10]	26" / 66 cm [W-1 / W-3] 26 1/2" / 67 cm [W-10]	29" / 74 cm [W-1 / W-3] 29 1/2" / 75 cm [W-10]	27 1/4" / 69 cm
Largeur de l'assise	16 1/2" / 42 cm	20 1/2" / 52 cm	23 1/2" / 60 cm	16 1/2" / 42 cm	20 1/2" / 52 cm	23 1/2" / 60 cm	22" / 56 cm
Haut. appui-bras/siège	8" / 20 cm			7" / 18 cm [W-1 / W-3] 8" / 20 cm [W-10]			7" / 18 cm
Profondeur	32" / 81 cm			33" / 84 cm			33" / 84 cm
Profondeur d'assise	Ajustable de 15" à 18" [38 à 46 cm]	17 1/2" / 45 cm de série ou ajustable de 15" à 18" [38 à 46 cm] avec option R-C1	Ajustable de 15" à 18" [38 à 46 cm]	Ajustable de 15" à 18" [38 à 46 cm]	17 1/2" / 45 cm de série ou ajustable de 15" à 18" [38 à 46 cm] avec option R-C1	Ajustable de 15" à 18" [38 à 46 cm]	18" / 46 cm
Hauteur de dossier	31" / 79 cm [Classique] 29" / 74 cm [Contemporain]						28" / 71 cm
Angle siège/dossier	Ajustable de 95 à 115 degrés	105 degrés de série ou ajustable de 95 à 115 degrés avec option R-C1	Ajustable de 95 à 115 degrés	Ajustable de 95 à 115 degrés	105 degrés de série ou ajustable de 95 à 115 degrés avec option R-C1	Ajustable de 95 à 115 degrés	105 degrés
Capacité maximale	300 lb / 136 kg		450 lb / 205 kg	300 lb / 136 kg		450 lb / 205 kg	350 lb / 159 kg
Poids	58 lb / 26 kg	61 lb / 28 kg	67 lb / 31 kg	57 lb / 26 kg	60 lb / 27 kg	66 lb / 30 kg	75 lb / 34 kg

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.
Toutes les dimensions sont ± 1/2" [1,3 cm].

série R

Métal décoratif

(Largeurs disponibles : 17", 20", 24")

Avec sa structure métallique garantie à vie, son dossier style Contemporain sans surpiqûres et l'option d'appui-bras en polyuréthane, le Thera-Glide® modèle R est un fauteuil berçant sécuritaire qui répond aux normes de désinfection les plus strictes.



série W-10

Bois

(Largeurs disponibles : 17", 20", 24")

Le Thera-Glide® de bois combine une structure d'acier robuste et durable avec des cadres latéraux et des patins de bois qui lui confèrent un aspect traditionnel et chaleureux.

Cinq teintes de bois ainsi que deux styles de dossier au choix vous permettront d'agencer au mieux le Thera-Glide® de bois avec votre espace de vie.



série T

Style Transitionnel

(Largeur unique : 22")

Le Thera-Glide® Transitionnel offre toutes les caractéristiques de sécurité de nos autres fauteuils berçants. Son design dit « transitionnel » alliant confort et modernité s'avérera être un atout chaleureux pour vos intérieurs.

Notre série T saura convenir au plus grand nombre. En effet, grâce à ses coussins profilés faciles à nettoyer, ses appuis-bras en bois courbés, sa hauteur ajustable et sa capacité maximale de 350 lb (159 kg), le Thera-Glide® Transitionnel est un fauteuil berçant sécuritaire idéal pour les aires communes de vos résidences.



Structure de bois ornementale (voir choix de teintes Série W)

Panneaux latéraux recouverts pour un fini moderne et épuré



Anti-basculés assurant une stabilité dans les quatre axes pour des transferts faciles et sécuritaires



Blocage du mécanisme de bercement (de série sur tous les modèles)

série W-1 et W-3

Oasis

(Largeurs disponibles : 17", 20", 24")

Nos nouveaux modèles de fauteuils autobloquants entièrement recouverts sont offerts en deux versions de styles contemporains.

Le W-1 répond admirablement aux exigences de prévention des infections en soins aigus. Ses surfaces lisses et accessibles où les coutures sont réduites au minimum facilitent le nettoyage avant réattribution.

Le W-3 offre patins de bois et surpiqûres ainsi que des appuis-bras de merisier optionnels, ce qui lui permet de s'intégrer aux décors des plus prestigieuses résidences pour aînés.




Mécanisme autobloquant intégré au dossier

Pattes de métal robustes

Roulettes arrière pour faciliter les déplacements

Anti-basculés assurant une stabilité dans les quatre axes pour des transferts faciles et sécuritaires

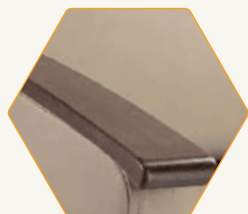

le bercement...

- + améliore de façon significative la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie.
- + entraîne une réduction de la prise de médication telle que les anxiolitiques.
- + combat de manière thérapeutique l'anxiété et la dépression chez les personnes souffrant de démence et/ou d'Alzheimer¹.
- + apporte des bénéfices importants aux nouveau-nés ainsi qu'à leur mère².

¹[Child Study Center, School of Medicine, Yale University]. ²[Watson, Wells et Cox, Rochester University, 1998].

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ITEM I	DESCRIPTION	Série R	Série T	W-1	W-10	W-3
R-C1	Profondeur d'assise et angle de dossier ajustables 15" à 18" (38 à 46 cm) / 95 à 115 degrés	0	—	0*	0*	0*
R-C2	Panneaux latéraux	0	—	—	—	—
R-C4	Pattes ajustables pour hauteur d'assise 21" à 24" (53 à 61 cm)	0	—	—	—	—
R-C7	Appuis-bras en polyuréthane	0	—	—	—	—
R-020	Tabouret oscillant en métal	0	—	—	—	—
R-030	Tabouret fixe en métal	0	—	—	—	—
RA-01	Table d'activités opaque	0	—	—	0	—
RA-02	Table d'activités avec fenêtre en Lexan	0	—	—	0	—
RA-03	Sangle de retenue de table fixée	0	—	—	0	—
RA-03A	Sangle de retenue de table englobante	0	—	—	0	—
RA-04	Ensemble de roues arrière pour Thera-Glide® de bois	—	0	—	0	0
RA-09	Sac de rangement latéral	0	—	—	0	—
RA-10	Releveur et aplanisseur d'assise 1" (2,5 cm)	0	—	0	0	0
RA-13	Releveur et aplanisseur d'assise à inclinaison arrière	0	—	0	0	0
RA-19	Ensemble butée d'abduction et toile universelle noire	0	—	0	0	0
RA-20	Toile de dossier seule pour appuis latéraux	0	—	0	0	0
RA-23	Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle	0	—	0	0	0
RA-24	Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle	0	—	0	0	0
RA-28-D	Option sans cache base	—	—	0	0	0
RA-30	Paire d'appui-bras en merisier massif	—	—	0	—	0
RB-18	Appui cervical	0	—	0	0	0
WOF-22	Tabouret avec appui-pieds	—	0	0	0	0
AC-04	Coussin de recouvrement de table d'activités	0	—	—	0	—
Z-C8	Coussin PRÉ-CURE® PRO	0	—	0	0	0
+ : De série 0 : Option — : Non disponible						

*Option sur 20", de série sur modèles 17" et 24".

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Les fauteuils Thera-Glide® sont offerts de série avec un recouvrement de vinyle. Des vinyles «Silvertex», des Cryptons ainsi qu'une sélection quasi-infinie de recouvrements sont disponibles en option. De plus, nos clients peuvent aussi nous fournir leur propre tissu au besoin (COM).

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

DESCRIPTION	Série R	Série T	W-1	W-10	W-3
Appuis-bras allongés avec prise ergonomique	+	+	0	+	0
Ensemble de coussins amovibles pour un nettoyage facile	+	+	+	+	+
Système de blocage automatique à positions infinies	+	+	+	+	+
Verrouillage du mécanisme de blocage	+	+	+	+	+
Anti-basculés latéraux	+	+	+	+	+
Roulettes arrière pour aider le déplacement	+	0	+	0	0
Hauteur d'assise ajustable	+	+	+	+	+
Siège à suspension de ressorts sinueux	—	+	—	—	—
Cache-base de couleur assortie	—	+	+	+	+
+ : De série 0 : Option — : Non disponible					

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE



THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



THERA-GLIDE®
OASIS BERÇANT



THERA-GLIDE®
OASIS STATIONNAIRE



DYN-ERGO



ÉVOLUTION



NOMADE



VERSATILE



UTILITÉ

CONFORT ET POSITIONNEMENT



COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM

ACCESSOIRES



COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa⁺

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

Édité le 2023-06