

fauteuils berçants autobloquants


Thera-Glide®

Séries R, W et T

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS

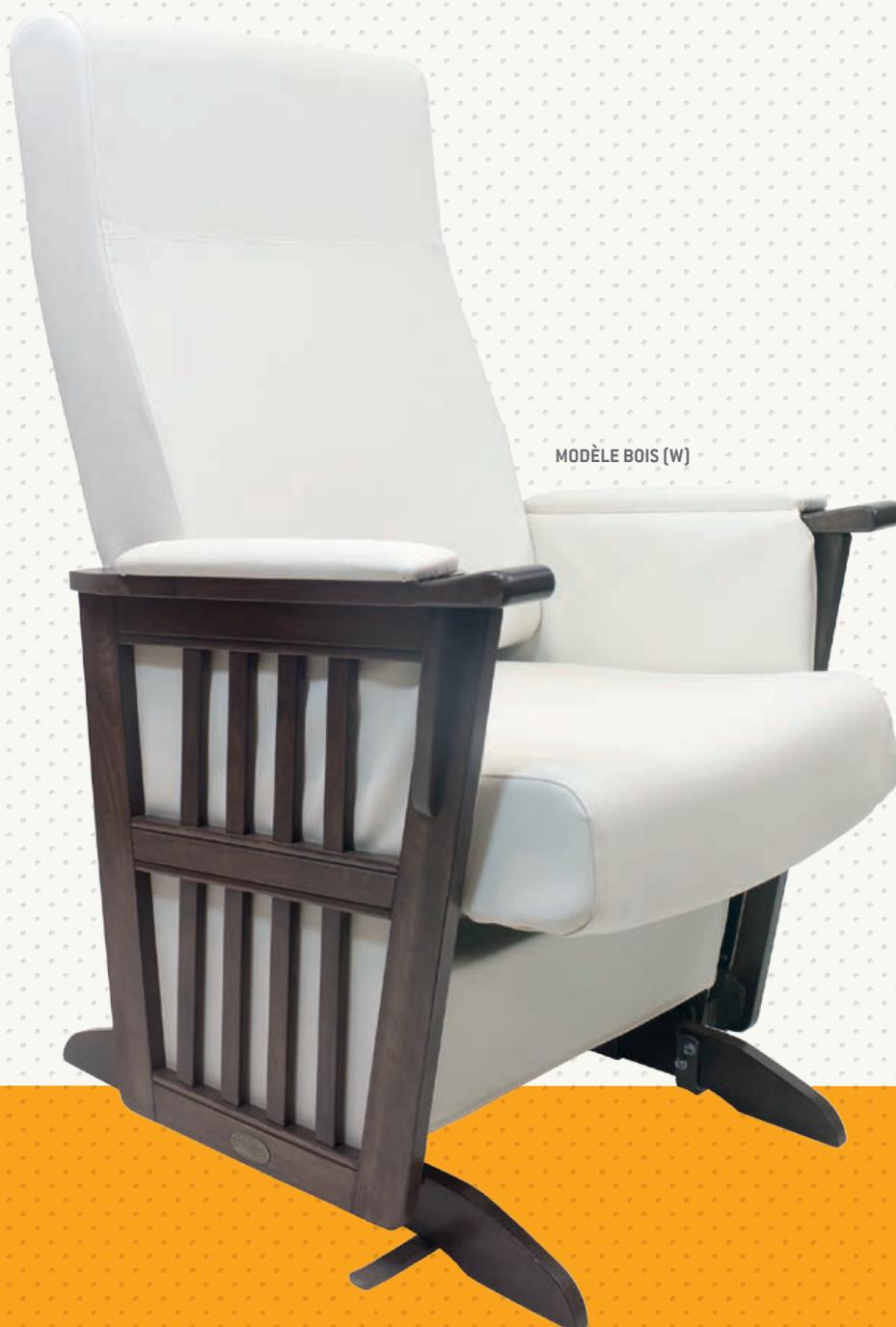

SUPPORT À L'AUTONOMIE


Thera-Glide®

fauteuils berçants

série R Métal décoratif

(Largeurs disponibles : 17", 20", 24")

Le fauteuil Thera-Glide® a su faire sa place dans les milieux de la santé, tant par ses effets thérapeutiques que par ses incroyables caractéristiques fonctionnelles et sécuritaires. Son mécanisme breveté d'immobilisation automatique rend le fauteuil fixe lors de la levée et permet le bercement lorsque la personne est complètement installée. Le système est facile, silencieux et bloque à n'importe quelle position. Selon le modèle, les possibilités d'ajustements et d'accessoires permettent d'adapter le Thera-Glide® en fonction de vos besoins spécifiques. Il est d'entretien facile grâce aux recouvrements amovibles et aux matériaux utilisés.

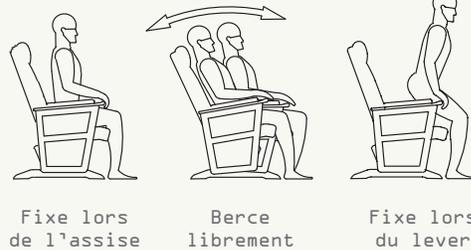

Dossier de style Contemporain facilitant le nettoyage (styles Classique et Confort Plus disponibles sur demande)

Appui-bras allongés pour une meilleure prise en main

Ajustement de profondeur d'assise et d'angle de dossier, optionnels sur le modèle Métal 20"

Ajustements de hauteur rapide et facile par indexeurs

Avec sa structure métallique garantie à vie, son dossier style Contemporain sans surpiqures et l'option d'appui-bras en polyuréthane, le Thera-Glide® modèle R est un fauteuil berçant sécuritaire qui répond aux normes de désinfection les plus strictes



► série W Bois

(Largeurs disponibles : 17", 20", 24")



DOSSIER CLASSIQUE



DOSSIER CONFORT +



Ajustable en hauteur
par boulonnage pour
un confort optimal

Ajustement de profondeur d'assise
et d'angle de dossier, optionnels
sur le modèle Bois 20"

Les composantes de bois de ce Thera-Glide®
sont fixées à une structure intérieure
en acier robuste et durable

Quatre teintes de bois et trois styles
de dossier permettent de personnaliser
le Thera-Glide® de bois selon vos goûts



10. MERISIER
(série R/W/T)



11. NATUREL
(série W/T)



12. ACAJOU
(série W/T)



13. NOYER
(série W/T)



14. ÉBÈNE
(série W/T)



Supports latéraux pour une stabilité optimale

► série T Style Transitionnel

(Largeur unique : 22")

Le Thera-Glide® Transitionnel offre toutes les caractéristiques de sécurité de nos autres fauteuils berçants. Son design dit « transitionnel » alliant confort et modernité s'avérera être un atout chaleureux pour vos intérieurs.

Notre série T saura convenir au plus grand nombre. En effet, grâce à ses coussins profilés faciles à nettoyer, ses appui-bras en bois courbés, sa hauteur ajustable et sa capacité maximale de 350 lb (159 kg), le Thera-Glide® Transitionnel est un fauteuil berçant sécuritaire idéal pour les aires communes de vos résidences.



Structure de bois ornementale
(voir choix de teintes Série W)

Panneaux latéraux recouverts
pour un fini moderne et épuré

Blocage du mécanisme de bercement
(de série sur tous les modèles)



le bercement...

- + améliore de façon significative la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie.
- + entraîne une réduction de la prise de médication telle que les anxiolitiques.
- + combat de manière thérapeutique l'anxiété et la dépression chez les personnes souffrant de démence et/ou d'Alzheimer¹.
- + apporte des bénéfices importants aux nouveau-nés ainsi qu'à leur mère².

¹[Child Study Center, School of Medicine, Yale University]. ²[Watson, Wells et Cox, Rochester University, 1998].

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Les fauteuils Thera-Glide® sont offerts de série avec un recouvrement de vinyle. Des vinyles « Silvertex » contenant du nitrate d'argent*, des Cryptons ainsi qu'une sélection quasi-infinie de recouvrements sont disponibles en option. De plus, nos clients peuvent aussi nous fournir leur propre tissu au besoin (COM).

*Le nitrate d'argent est reconnu pour ses vertus antibactériennes.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

DESCRIPTION	Série R	Série W	Série T
Appuis-bras allongés avec prise ergonomique	+	+	+
Ensemble de coussins amovibles pour un nettoyage facile	+	+	+
Système de blocage automatique à positions infinies	+	+	+
Verrouillage du mécanisme de blocage	+	+	+
Anti-basculés latéraux	+	+	+
Roulettes arrière pour aider le déplacement	+	0	0
Hauteur d'assise ajustable	+	+	+
Siège à suspension de ressorts sinueux	—	—	+
Cache-base de couleur assortie	—	+	+

+ : De série 0 : Option — : Non disponible

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION	Série R	Série W	Série T
R-C1	Profondeur d'assise et angle de dossier ajustables 15" à 18" (38 à 46 cm) / 95 à 115 degrés	0	0*	—
R-C2	Panneaux latéraux	0	—	—
R-C4	Pattes ajustables pour hauteur d'assise 21" à 24"	0	—	—
R-C7	Appuis-bras en polyuréthane	0	—	—
R-020	Tabouret oscillant en métal	0	—	—
R-030	Tabouret fixe en métal	0	—	—
RA-01	Table d'activités opaque	0	0	—
RA-02	Table d'activités avec fenêtre en Lexan	0	0	—
RA-03	Sangle de retenue de table fixée	0	0	—
RA-03A	Sangle de retenue de table englobante	0	0	—
RA-04	Ensemble de roues arrière pour Thera-Glide® de bois	—	0	0
RA-09	Sac de rangement latéral	0	0	—
RA-10	Releveur d'assise 1" (2,5 cm)	0	0	—
RA-13	Releveur et aplanisseur d'assise à inclinaison arrière	0	0	—
RA-19	Ensemble butée d'abduction et toile universelle noire	0	0	—
RA-23	Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle	0	0	—
RA-24	Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle	0	0	—
RA-28-D	Option sans cache base	—	0	—
RA-29	Option sans levier de désactivation	—	0	0
RB-18	Appui cervical	0	0	—
WOF-22	Tabouret avec appui-pieds	—	0	0
Z-C8	Coussin PRÉ-CURE® PRO	0	0	—

+ : De série 0 : Option — : Non disponible

*Option sur 20", de série sur modèles 17" et 24".

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Série R – Métal décoratif			Série W - Bois			Série T - Transitionnel
	R-505 PETIT	R-605 RÉGULIER	R-705 LARGE	W-2XXX-17-XX PETIT	W-2XXX-20-XX RÉGULIER	W-2XXX-24-XX LARGE	
Hauteur totale	44" à 47" / 112 cm à 119 cm			44" à 47" / 112 à 119 cm			42 1/2" à 45 1/2" / 108 à 116 cm
Hauteur siège/sol	Ajustable de 16" à 19" / 41 à 48 cm						
Largeur totale	22" / 56 cm	26" / 66 cm	29" / 74 cm	22 1/2" / 57 cm	26 1/2" / 67 cm	29 1/2" / 75 cm	27 1/4" / 69 cm
Largeur de l'assise	16 1/2" / 42 cm	20 1/2" / 52 cm	23 1/2" / 60 cm	16 1/2" / 42 cm	20 1/2" / 52 cm	23 1/2" / 60 cm	22" / 56 cm
Haut. appui-bras/siège	8" / 20 cm			8" / 20 cm			7" / 18 cm
Profondeur	32" / 81 cm			33" / 84 cm			33" / 84 cm
Profondeur d'assise	17 1/2" / 45 cm			17" / 43 cm			18" / 46 cm
Hauteur de dossier	31" / 79 cm			29" / 74 cm			28" / 71 cm
Capacité maximale	300 lbs / 136 kg		450 lbs / 205 kg	275 lbs / 125 kg		450 lbs / 205 kg	350 lbs / 159 kg
Poids	58 lbs / 26 kg	61 lbs / 28 kg	67 lbs / 31 kg	57 lbs / 26 kg	60 lbs / 27 kg	66 lbs / 30 kg	75 lbs / 34 kg

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE

THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



DYN-ERGO



NOMADE



VERSATILE



ÉVOLUTION



UTILITÉ



CONFORT ET POSITIONNEMENT

COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM



ACCESSOIRES

COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT



Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa+

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488